



laborloja
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS



Analizador de Gases Sanguíneos Veterinário

1 CARACTERÍSTICA

Aspiração automática

Procedimento simples e prático.

Resultados precisos

Boa correlação com os testes de referência, auxiliando os médicos veterinários na obtenção de um diagnóstico preciso.

Sem manutenção

Equipamento compacto, sem reagentes líquidos e sem necessidade de manutenção.

Transporte com facilidade

Pequeno (30,2 x 22,6 x 18,0 cm) e leve (aproximado: 6,5 kg), o equipamento possui alça para um transporte facilitado.

As vantagens de seu design fazem com que ele se adapte a diferentes cenários.



Bateria recarregável ou ligada à energia



Impressora embutida



Função de conexão LIS




Vídeos de instruções de uso

2 OPERAÇÃO

Operação completa em 4 etapas




Amostragem

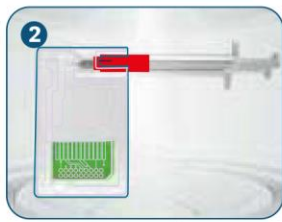

Conexão




Inserção

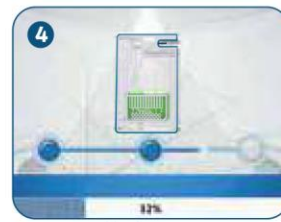

Leitura

3 COMPONENTES

Cartão de teste

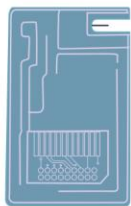

Um cartão de teste, vários parâmetros.

- Tipo de amostra: sangue arterial
- Volume de amostra: 80 μ L
- Tempo de análise total: ~3 minutos (150 segundos de calibração + 30 segundos de teste)
- Armazenamento em temperatura ambiente por até 9 meses
- Compatível com seringas heparinizadas (Heparina Lítica)

Pacote de reagente



- Armazenamento de 2 - 8°C por até 12 meses
- Duração após instalação: 45 dias ou 100 testes

Controle de qualidade



- Controle de qualidade para Gases/Eletrólitos ou Hematócrito

ITENS DE TESTE

Gases sanguíneos básicos

pH, pCO₂, pO₂

Hematologia

Hct

Bioquímica

K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻

Eletrólitos


Glu, Lac

RESULTADOS CALCULADOS

23 resultados:

cH+, cH+ (T), pH (T), pCO₂ (T), pO₂ (T), HCO₃-atd, HCO₃-std, BB (B), BE (B), BE (ecf), ct CO₂, Ca++ (7.4), AnGap, tHb (est), sO₂ (est), pO₂ (A-a), pO₂ (A-a) (T), pO₂ (a/A), pO₂ (a/A) (T), RI, RI (T), pO₂/FI O₂, pO₂ (T)/FI O₂, POP

VALORES DE REFERÊNCIA

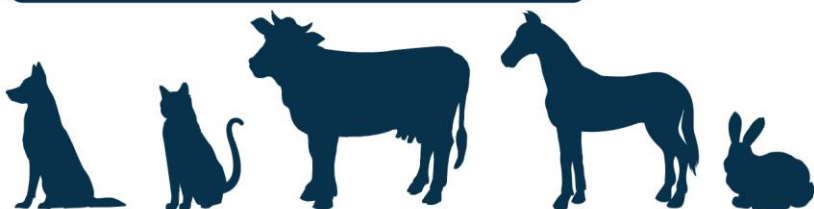

MARCELO T. SHIGUEMATSU
DÉBORA P. SHIGUEMATSU
DIRETORES DE SOLUÇÕES

067 9 9916.6315
067 9 9604.6314
comercial@laborloja.com.br
www.laborloja.com.br

R. Antônio Correia, 245 Sala 04
Jd. Monte Líbano, CG | MS, 79.004-460

